

ST.A.R.90 F4 Codo



Fijador externo articulado

Fijador externo estable unilateral

Flexión y extensión controlada

Fácil de usar, discreto

*Movimiento guiado del Codo
de manera estable*

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas regulatorias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

ST.A.R.90 F4 Codo

Lesiones agudas del ligamento o de la articulación del codo (dislocaciones inestables, fracturas inestables, fracturas multi fragmentarias relacionadas con una osteosíntesis interna), lesiones crónicas articulares del codo (inestabilidad del codo y rigidez).

- ✓ Fijador del codo Universal y Unilateral (Derecho e Izquierdo)
- ✓ Posicionamiento versátil de los tornillos óseos
- ✓ Tornillos óseos corticales autoperforantes de doble diametro
- ✓ Distracción articular controlada micrométricamente


Componente articular radiotransparente para una visualización óptima con rayos X



Ejemplo de caso clínico
Dislocación de la fractura
del codo



Pre-op

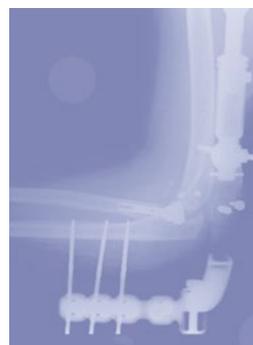

Post-op



Remoción del fijador

Referencias bibliográficas

Maniscalco P, Pizzoli AL, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly people. *Injury*. 2014 Dec;45 Suppl 6:S53-7.



external
FIXATION



monolateral
fixators



articulations

ESTÉRIL



Optional accessories


Limitador de R.O.M. fijador codo

Accesorio radiotransparente que permite una flexo-extensión controlada de la articulación.



Control de flexión-extensión

Dependiendo de los requisitos de tratamiento, el Range Of Motion (R.O.M.) viene determinado por la posición de los 2 tornillos metálicos en la escala graduada.

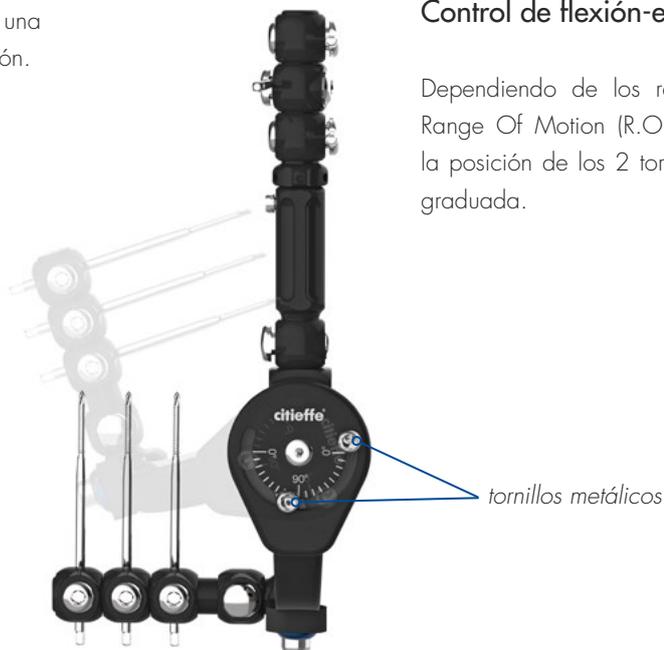

Dispositivo de flexión-extensión

Accesorio que le permite forzar el movimiento de la articulación del codo.



Flexión-extensión inducida

Indicado en casos de rigidez o deficit en la extensión y se utiliza con ayuda de ejercicios de fisioterapia.



Extension

Permite la extensión distal de la colocación de los tornillos oseos cubital hasta 7 cm más de manera distal.



Extensión distal de los tornillos cubitales

Está indicado para todos los casos en que eventualmente otros sistemas de fijación interna o zonas de estrés de los tejidos blandos impidieran la introducción de tornillos óseos de cúbito en las abrazaderas estándar.



ST.A.R.90 F4 Codo

Fijador
externo articulado



EXTERNAL
fixation



monolateral
fixators



articulations

citieffe®
Essential moves in Trauma



Citieffe srl a socio unico

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES

